

¿VIH? La recomendación más fácil:

The non-invasive nature of OraQuick® was popular with patients and reduced anxiety surrounding testing and blood tests. Similar reasons have been given by participants of other studies<sup>1</sup>. It has been suggested that the combination of shorter waiting times to results and reduced fear of testing may encourage more people to have HIV tests and this could be a useful strategy in reducing undiagnosed infections<sup>2</sup>.

#### References

1. Zelin J, Garrett N, Saunders J et al. The performance of OraQuick ADVANCE Rapid HIV-1/2 Test in a High Risk Population Attending GU Medicine Clinics in East London. Int J STD and AIDS; accepted for publication 31<sup>st</sup> March 2008.
2. Hutchinson AB, Corbie-Smith G, Thomas SB, Mohanan S, del Rio C. Understanding the patient's perspective on rapid and routine HIV testing in an inner-city urgent care center. AIDS Educ Prev 2004; 16:101-114.



Gran Via de les Corts Catalanes, 184  
08038 Barcelona, España  
Teléfono: +34 93 394 53 50  
Fax: +34 93 394 53 80


“No cierre los ojos  
a la innovación”



**OraQuick**  
**ADVANCE**  
Rapid HIV-1/2 Antibody Test

Ultimo avance en el diagnóstico  
precoz del VIH-1/2 en fluido oral

# Prueba rápida de detección de anticuerpos anti VIH-1/2

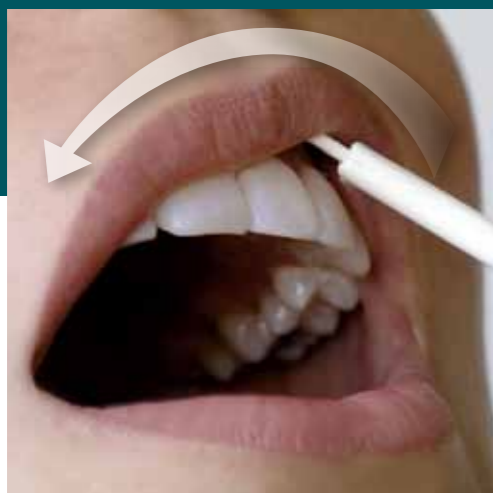

## A partir de fluido oral:

- Proceso realizable en 2 pasos
- Resultado en 20 minutos
- Precisión superior al 99%
- Prueba no invasiva

También realizable a partir de:

- Sangre total por pinchazo en dedo (a partir de una sola gota)
- Sangre total por venopunción
- Plasma




Observe la precisión del Test rápido OraQuick Advance para VIH-1 y VIH-2

PRUEBA	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD
VIH-2*	100.0%	—
FLUÍDO ORAL	99.3%	99.8%
SANGRE COMPLETA OBTENIDA POR PINCHAZO EN DEDO	99.6%	100.0%
PLASMA	99.6%	99.9%

\*VIH-2 (se basa en >800 muestras de suero/plasma provenientes de un banco de especímenes. Además, se hicieron pruebas con sangre obtenida por pinchazo de dedo y con fluido oral en 3 individuos infectados con VIH-2). No se reportó la especificidad. No se reportó la sensibilidad ni especificidad para pruebas con sangre completa obtenida por venopunción.

## OraQuick Advance permite realizar el test VIH-1/2 de manera simple

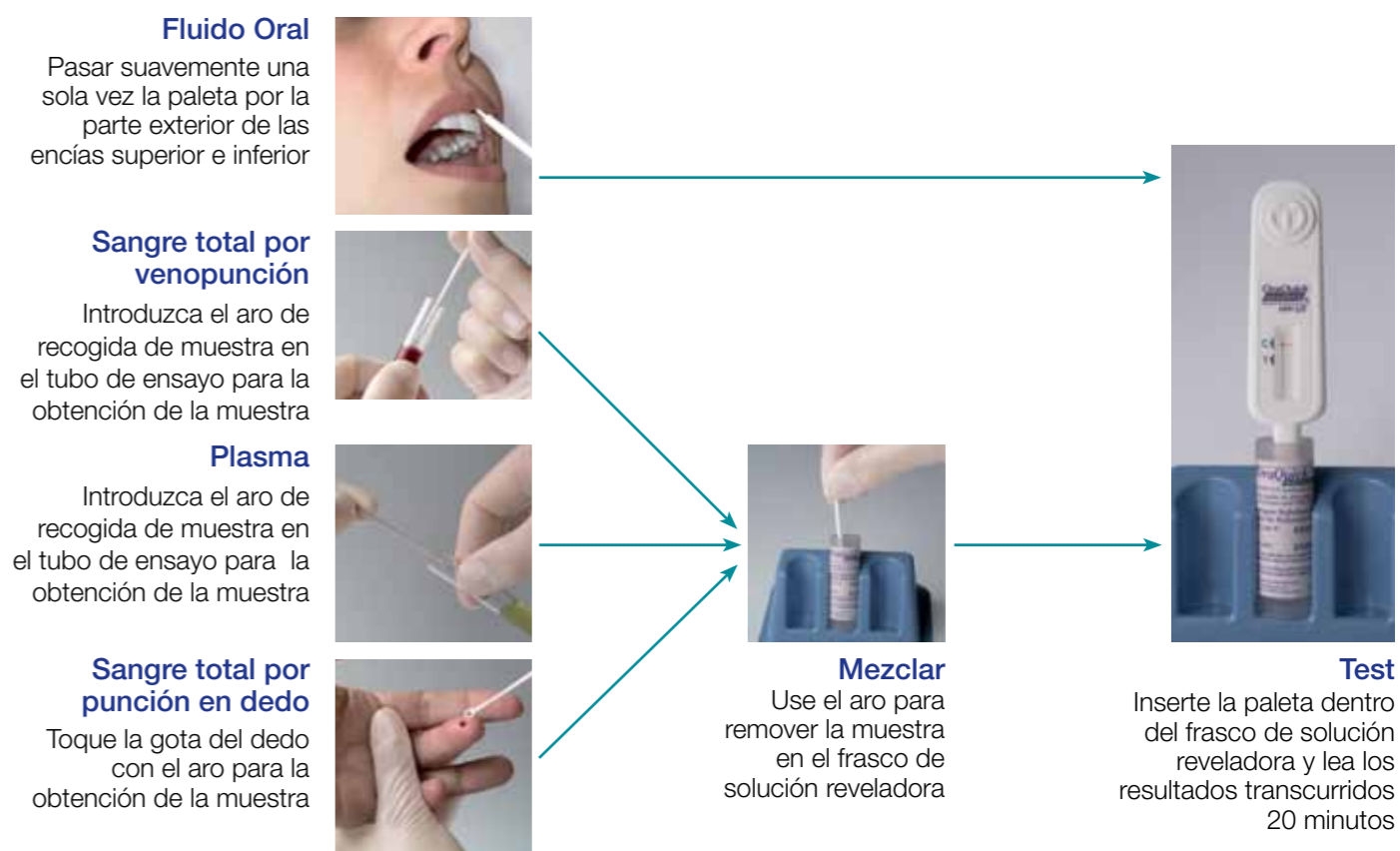

## Lectura de los resultados



### Ejemplo de Resultado No reactivo o Negativo:

- La única línea visible es la de control "C".
- En la zona del test "T" no aparece ninguna línea.
- El resultado del test se interpreta como negativo para anticuerpos VIH-1 y anticuerpos VIH-2.



### Ejemplo de resultado Reactivo o Positivo:

- Aparece una línea en la zona de control "C" y otra línea en la zona del test "T".
- El test se interpreta como PRELIMINARMENTE POSITIVO para anticuerpos VIH-1 o VIH-2.